

# id-MED Hygieneschutzbezug- mit Evakuierungsausstattung HEA 212SP



Art.Nr.: 0930051

Evakuierung auf einer Ebene horizontal und Fluchttreppe vertikal


Made in Germany

- Verbindung von Hygieneschutzbezug und Evakuierungsausstattung mit vorbeugender Sicherheit genannt die **EVAKUIERUNGSMATRATZE**
- Funktionsfähig mit allen Bettenmodellen 90x200x12/14 cm
- Funktionsfähig mit allen vorhandenen Pflegematratten
- Sichere Bedienung durch eine Person
- Keine Beeinträchtigung der Funktionen durch vorhandene A - D Auflagen
- Funktioniert mit einteiligen und dreiteiligen Matratzensystemen
- Gleitfähig auf allen festen Unterlagen (z.B. PVC, Linoleum, Stein, Nadelfilz u.ä.)
- Gleitfähig auf trockenen und nassen Böden (Achtung: Baumwolltücher saugen sich auf nassen Böden fest !)
- Sichere Fixierung des Patienten durch Sicherheitsklettband/Gurte mit Schnellverschluss
- Hergestellt aus einem flamsicheren Material nach MVSS 302 und DIN EN 1865
- Ausstattung mit Zugband am Kopf - und Fußende, damit ein falsches Einlegen unmöglich ist
- Der Matratzenschutzbezug besteht aus Trend Plus 2008, 100 % PES mit einseitiger PU-Beschichtung Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN. Virendicht- und bakterien dicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei, wischdesinfizierbar schwer entflammbar nach Crib 5. Gute Hautverträglichkeit, Allergiker geeignet
- Die Evakuierungsausstattung besteht aus Nylon beschichtet geprüft nach DIN 4102 B1 mit insgesamt 4 Tragegriffen und einem Kopfzugband sowie einem Fußsteuerungsband. Diese Evakuierungsausstattung kann mit Klettbander oder Gurtschlösser ausgestattet werden.
- Unser HEA 212SP ist so ausgelegt, für Personen bis zu einem Gewicht von 200 kg

## Reinigung der Evakuierungstücher:

Waschbar bis 95° C und wischdesinfizierbar, thermische Desinfektion mittels VDA-Anlage (bis 105°C)


Als Desinfektionsmittel für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei praxisorientierten, gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.

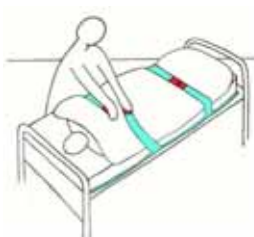

Fixieren der Patienten



Einheit Tuch/Matratze/Patient

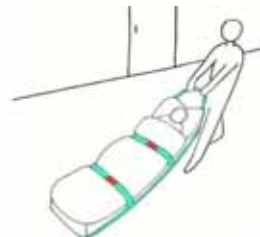

Flertung aus Gefahrenbereich



Rettung über Treppenhaus